



**Global Innovations Germany GmbH & Co. KG**

**Präsentation: Hot- & Cold- Packs**



**Step 1**

**Step 2**

**Step 3**

Heat Packs funktionieren durch einen sogenannten Phasenwechsel, der eine sofortige Wärme auslöst. Sie sind wiederverwendbar und in einer Vielzahl von unterschiedlichen Farben und Formen erhältlich. Während die kleineren Größen als wiederverwendbare Handwärmer genutzt werden können, sind die größeren Heat packs zur Behandlung verschiedener Körperpartien geeignet.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht von unterschiedlichen Formen.

## Anleitung::

- ↳ Um die Heat Packs zu aktivieren, mit Zeigefinger und Daumen das Metallplättchen knicken, dadurch wird die Krystallisation gestartet.
- ↳ Nach der Krystallisation das Hotpack drücken, damit es weich wird.
- ↳ Nach Gebrauch in kochendes Wasser und etwa 5 Minuten kochen lassen oder bis sich die Kristalle aufgelöst haben.
- ↳ Ein direkter Kontakt zwischen Hotpack und Topfboden sollte vermieden werden.
- ↳ Nicht für die Mikrowelle geeignet!

# Heat Packs – Handwärmer in Sonderform



Selbstverständlich gibt es unsere Heat Packs in verschiedenen Größen, Formen, PVC Farben oder Gel-Farben.

Vorschlag: Sonderanfertigung ähnlich Ihrem Firmenlogo oder Ihrem Maskottchen

Benutzung:

Die Heat Packs können mit einem einfachen Klick erwärmt werden.

Zur erneuten Benutzung muss das Heat Pack nachdem es hart geworden ist uns ausgekühlt hat in einem Topf mit kochendem Wasser erwärmt werden, bis die fest gewordene Flüssigkeit sich wieder verflüssigt hat.



**Hot Pack Gesicht**



**Hot Pack Augen**



**Hot Pack Augen 2**



**Hot Pack Fuß**

Heiß-Therapie Produkte für verschiedene Körperpartien: können mit einem einfachen Klick erwärmt werden.

Weitere Formen finden Sie auf den folgenden Folien.

^

# Body Heat Packs



Hot Pack 1



Hot Pack 2



Hot Pack 3



Hot Pack 4



Hot Pack 5




Hot Pack 6



Hot Pack 7



Hot Pack 8

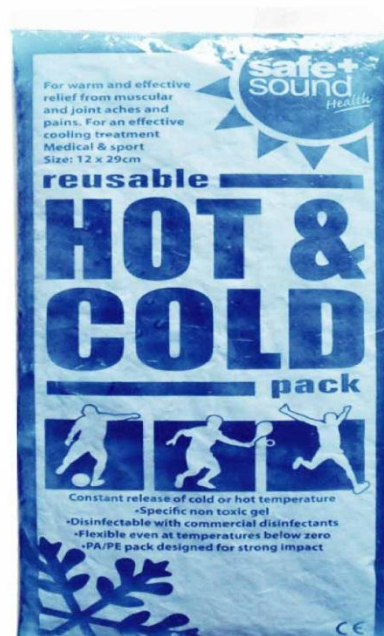

## Wirkung::

- ↘ Kalt-Kompressen: physikalische Therapie bei Dehnung, Verbrennungen, Augen-Müdigkeit
- ↘ Heiß-Kompressen: lindern Rheumabedingte Schmerzen, Nervenschmerzen, Rückenschmerzen...

## ↘Anleitung::

- ↘ Kalt Kompressen: mindestens 30 Minuten vor Benutzung in den Kühlschrank legen.
- ↘ Heiß-Kompresse: für ca. 60 Sekunden vor Gebrauch auf mittlerer Hitzestufe in die Mikrowelle legen oder für 10 Minuten in heißes Wasser legen. Es kann eine Temperatur von ca. -10 bis + 60 °C erreichen und hält die Temperatur für etwa 30 Minuten.

## ↘Eigenschaften:

- ↘ Wiederverwendbar sowohl als Heiß- als auch Kalt-Kompresse. Bleiben weich und biegsam nach dem Einfrieren.
- ↘ Einfach mit Wasser und Seife zu reinigen.
- ↘ In verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.



# Hot & Cold Therapy Packs



Reihe 1: Standardformen wie Stern, Herz, ovale Formen, runde Formen.

Reihe 2 & 3: Die Therapy Packs sind selbstverständlich auch mit anderen Materialbezügen erhältlich.

# Gel Hot & Cold Augenmasken I



Warm und kalt nutzbar.

In verschiedenen Farben und Formen gestaltbar.



## Gel Hot & Cold Augenmasken II



Warm und kalt nutzbar.

In verschiedenen Farben und Formen gestaltbar.

Benutzung:

Die Hotpacks können mit einem einfachen Klick erwärmt werden.

Zur erneuten Benutzung muss das Hotpack, nachdem es hart geworden ist und ausgekühlt hat, in einem Topf mit kochendem Wasser erwärmt werden, bis die fest gewordene Flüssigkeit sich wieder verflüssigt hat.




## Wirkung:

Zur Linderung von Schmerzen aufgrund von Überdehnung, Quetschungen, Muskelriss und Verbrennungen. Zudem wirken sie lindernd bei Fieber, Kopfschmerzen, Zahnschmerzen und Mückenstichen. Wenn keine anderen Kühlquellen verfügbar sind, halten sie Lebensmittel und Getränke frisch.

Einweg-Kaltkompressen sind für den sofortigen Einsatz gedacht. Sie können im Verbandskasten bzw. in Erste-Hilfe-Boxen mitgeführt werden. Die Temperatur ist sofort optimal zum Kühlen.

# Einweg Heiß-Kompressen

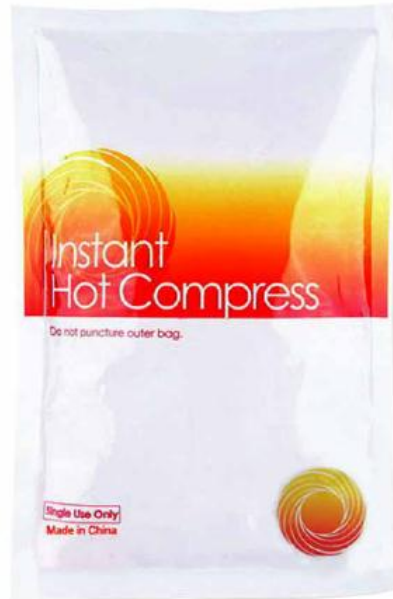

Wirkung:

Anwendbar bei Rheuma, Arthritis, Bauchschmerzen oder Erkältungen.

- ↳ Einfach zu Benutzen.
- ↳ Erreicht ca. 43 °C
- ↳ Hält bis zu 40 Minuten.

Erwärmt sich innerhalb von 5 Sekunden.



Wirkung:

Kühlender Schal zur sanften Erfrischung.

Wirkt auch vorbeugend gegen einen Sonnenstich bei heißen Temperaturen.

Auch als kühlende Krawatte oder Halstuch erhältlich.

Eigenschaften:

Er kann schnell durch Wasser aktiviert werden und ist nach der Trocknung wiedereinsatzbar.

Kühlt für mehrere Stunden.

# Hot & Cold Packs mit Gelkugeln



## Benutzung:

- ↳ Für Wärme-Therapie: Packs in Papier- oder Stofftuch eingewickelt für 20 Sekunden in die Mikrowelle legen.
- ↳ Für Kälte-Therapie: Packs für mindestens 2 Stunden einfrieren

## Eigenschaften:

- ↳ Packs können mit einer milden Seife gereinigt werden



Global Innovations Germany GmbH & Co. KG

Im Paesch 11

54340 Longuich

Tel.: +49 (0) 6502-93086-0

Fax.: +49 (0) 6502-93086-29

[info@globalinnovations.de](mailto:info@globalinnovations.de)

[www.globalinnovations.de](http://www.globalinnovations.de)